



LH Ovulation Rapid Test Dipstick (Urine)

Package Insert

For Self-testing

REF FLH-U101H	English
---------------	---------

A rapid test for the qualitative detection of luteinizing hormone (LH) in human urine.

【INTENDED USE】

The LH Ovulation Rapid Test Dipstick (Urine) is a rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of human luteinizing hormone (hLH) in urine to aid in the detection of ovulation. The result can be read visually in minutes to indicate a positive or negative result for ovulation.

【SUMMARY】

Ovulation is the release of an egg from the ovary. The egg then passes into the fallopian tube where it is ready to be fertilized. In order for pregnancy to occur, the egg must be fertilized by sperm within 24 hours after its release. Immediately prior to ovulation, the body produces a large amount of human luteinizing hormone (hLH) which triggers the release of a ripened egg from the ovary. This “hLH surge” usually takes place in the middle of the menstrual cycle.¹ The LH Ovulation Rapid Test Dipstick (Urine) is a complete system to help predict the time of ovulation, and peak fertility. It is during this fertile time that pregnancy is most likely to occur. The LH Ovulation Rapid Test Dipstick (Urine) detects the hLH surge in urine, signaling that ovulation is likely to occur in the next 24-36 hours. The test utilizes a combination of antibodies including a monoclonal LH antibody to selectively detect elevated levels of LH. Important: The hLH surge and ovulation may not occur in all menstrual cycles.

【PRINCIPLE】

The LH Ovulation Rapid Test is a rapid lateral flow immunoassay for the qualitative detection of hLH surges in urine, signaling that ovulation is likely to occur in the next 24-36 hours. The test utilizes a combination of antibodies including a monoclonal hLH antibody to selectively detect elevated levels of hLH.

The urine sample moves forward laterally on the test due to capillary forces. In the presence of hLH an immunological reaction between hLH and labeled anti-hLH antibodies takes place leading to a distinct colored test line. Depending on the hLH concentration, the test line becomes lighter or darker. Other labeled antibodies from the control line. This reaction serves as a proof for the proper use and function of the test strip. This methodology is named immunochromatography.

【REAGENT】

The test contains anti-LH particles and anti-LH antibody coated on the membrane.

【SPECIMEN COLLECTION AND PREPARATION】

- Determine the optimal time for urine collection. For best results, collect urine at about the same time each day. Some women have found that their best specimen is after 12 noon. Do not collect the first urine specimen after waking up.
- Reduce liquid intake approximately 2 hours prior to urine collection.
- Record the date, cycle day and time of urine collection. See the **TEST RESULTS CHART** at the end of this package insert.
- Use a new specimen collection container for every sample.
- Urine can be stored at room temperature for up to 8 hours or at 2-8°C for up to 24 hours. Do not freeze. For best results, test urine on the same day that it is collected. If refrigerated, let urine reach room temperature before testing. Do not shake the container. If sediment forms at the bottom of the collection container, allow the sediment to settle. Use only urine from the top of the container.

【PRECAUTIONS】

Please read all the information in this package insert before performing the test.

- Do not use after the expiration date printed on the foil pouch.
- Do not use if pouch is torn or damaged.
- Store in a dry place at 2-30°C or 36-86°F. **Do not freeze.**
- Keep out of the reach of children.
- Do not open the test foil pouch until you are ready to start the test.
- For *in vitro* diagnostic use. Not to be taken internally.
- The used test can be disposed off in normal household waste.
- For single use only.

【STORAGE】

Store as packaged at room temperature or refrigerated (2-30°C). The test is stable through the expiration date printed on the sealed pouch. The test must remain in the sealed pouch until use. **DO NOT FREEZE.** Do not use beyond the expiration date. Avoid exposure to direct sunlight, humidity or heat.

【MATERIALS】

Materials provided: 1. Test Dipsticks; 2. Package Insert;

Materials required but not provided: 1. Specimen collection container; 2. Timer

【INSTRUCTIONS】

WHEN TO START TESTING

Calculate when to start testing using the chart below.

- First, determine your **Menstrual Cycle Length**. Your Menstrual Cycle Length is the number of days from the first day of your period (menstrual bleeding) to the last day before the next period starts.
- Next, determine the **Days to Count Ahead** after the period to start testing. Find the menstrual cycle length on the first row of the chart below, and read the corresponding number in the second row. This is the number of days after your period to begin testing.
- If your cycle is shorter than 21 days or longer than 38 days, consult your doctor. If you do not know your cycle length, you may begin the test 11 days after your first period since the average cycle length is 28 days.
- See the Example and Sample Calendar below to determine which day you should begin testing. First morning urine should NOT be used when testing for LH. For best results, you should test around the same time each day. You should reduce your liquid intake approximately 2 hours prior to testing. Perform 1 test each day over a period, or until the hLH surge has been detected.

When to Start Testing Chart

Menstrual Cycle Length	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Days to Count Ahead	6	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Example: My usual cycle length is 28 days. My last period started on the 3rd. The “When to Start Testing Chart” shows that I will count ahead 11 days beginning with the 3rd. When I count 11 days ahead on the calendar, I find that I will collect and test my urine starting on the 13th.

Sample Calendar

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	③	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			


③First day of the last period

☐Begin testing with the LH Ovulation Test

【DIRECTIONS FOR USE】

Determine the day you will begin testing using the “When to Start Testing Chart”. A timer is needed to perform the test (not supplied).

- Allow the test and urine specimen to reach room temperature (15-30°C) prior to testing.
- Bring the pouch to room temperature before opening it. Remove the Dipstick test from the sealed pouch and use it within one hour.
- With arrows pointing toward the urine specimen, immerse the test dipstick vertically in the urine specimen for **at least 10-15 seconds**. Do not pass the maximum line (MAX) on the test dipstick when immersing the dipstick. See illustration below.
- Place the test dipstick on a clean, dry, non-absorbent flat surface, start the timer.
- Wait for the colored line(s) to appear. **Read results at 5 minutes.** Do not interpret the result after 10 minutes. The used test can be disposed off in normal household waste.

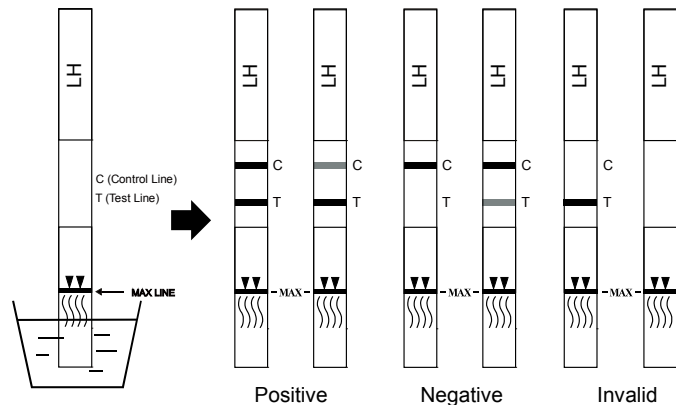

【READING THE RESULTS】

(Please refer to the illustration)

POSITIVE: Two lines are visible and the line in test line region (T) is the same as or darker than the line in the control line region (C). This indicates probable ovulation in 24-36 hours.

NEGATIVE: Two lines are visible, but the line in the test line region (T) is lighter than the line in the control line region (C), or there is no line in the test line region (T). This indicates that no hLH surge has been detected.

INVALID: Control line fails to appear. Insufficient specimen volume or incorrect procedural techniques are the most likely reasons for control line failure. Review the procedure and repeat the test with a new test. If the problem persists, discontinue using the test kit immediately and contact your local distributor.

【QUALITY CONTROL】

A procedural control is included in the test. A colored line appearing in the control line region (C) is considered an internal procedural control. It confirms sufficient specimen volume, adequate membrane wicking and correct procedural technique. A positive result indicates that the urine specimen contains the level of LH that would indicate the beginning of ovulation. Ovulation should begin in 24-36 hours.

A negative result indicates that no LH surge has been detected and daily testing should continue. Not every woman ovulates mid-cycle, therefore, a positive result may not appear during the selected days of testing. If there is no positive result, continue testing with the LH Ovulation Rapid Test for several more days. If negative results persist, test again during the next menstrual cycle.

【LIMITATIONS】

- For self-testing *in vitro* diagnostic use.
- This test may not be used as a form of birth control.
- Do not reuse the tests.
- The test results should not be affected by pain relievers, antibiotics and other common drugs. Medication containing hCG or hLH may affect the test and should not be taken while using the LH Ovulation Rapid Test. In addition, the test will not work properly for subjects who are pregnant, in menopause, or taking birth control pills.
- Keep out of the reach of children.

【EXTRA INFORMATION】

- Q: When can I do the test?**
A: After you determine the best day to start testing based on your monthly cycle, you can do the test any time on that day. Testing with first morning urine is not recommended because it is concentrated and may give a false positive result. Testing between 10:00 AM and 8:00 PM is a good time frame, with many research suggesting testing at 12:00 AM. Test at about the same time each day. Reduce your liquid intake for 2 hours before testing.
- Q: Can I use the LH Ovulation Rapid Test to avoid pregnancy?**
A: No, the test should not be used as a form of birth control.
- Q: How accurate is the LH Ovulation Rapid Test?**
A: A clinical evaluation was conducted comparing the results obtained using the LH Ovulation Rapid Test to another commercially available urine LH test. The in-house clinical trial included 300 urine specimens. The results demonstrated >99.9% specificity and >99.9% sensitivity with an overall accuracy of >99.9%.
- Q: What if no line appears in the Control region?**
A: If no line appears in the Control region after 5 minutes, the result is invalid and you should repeat the test with a new test. If the problem persists, please contact the manufacturer.
- Q: I have tested for several days and I did not see a surge. What do I do?**
A: Since every woman does not always ovulate at mid-cycle, you may not detect the hLH surge in the first seven days of testing. This could mean you have not ovulated yet and you should continue testing with an additional LH Test.
- Q: I have tested for 8 days or more and I still did not see my hLH surge, what is wrong?**
A: About 90% of ovulating women with regular cycles will see their surge during 8-10 days of testing. If you do not, it could mean that you have not ovulated this month. If you are having a short cycle this month, it is possible that you have ovulated before you started testing. If you are having a long cycle this month, you may not have ovulated yet. You may continue testing or test again next month. Don't worry; it is normal to have an occasional short or long cycle, or to have a cycle without ovulating.
- Q: I have used the ovulation test for three months, and each month I have seen a surge and have had intercourse that day or night. I have not become pregnant yet. What is wrong?**
A: First, it is important to remember that it can take normal, healthy couples many

months to become pregnant. There are many factors that can affect your ability to become pregnant even if you have been able to have intercourse during your most fertile days. If after several months you have no success, consult with your physician or health care provider.

8. **Q: What could interfere with my test result?**

A: If you are already pregnant, have recently been pregnant, or have reached menopause you may get a misleading result. Some prescription drugs, such as menotropins for injection and Danazol may affect the results you see. Please consult your physician if you have any questions about prescription drug interactions.

9. **Q: Will oral contraceptives affect the result?**

A: After using the pill your cycle may be irregular and may take some time to stabilize again. You may wish to wait until you have had two normal periods before starting to use the Test.

10. **Q: If the Test can determine my most fertile time, why can't I use it for contraception?**

A: Sperm can survive up to 72 hours, and this test predicts your LH surge only up to 24 to 36 hours in advance. Therefore, if you have intercourse before you discover your surge, the egg can still be fertilized.

11. **Q: How sensitive is the LH Ovulation Rapid Test?**

A: The LH Ovulation Rapid Test detects human luteinizing hormone (hLH) in urine at concentrations of 30 mIU/mL or higher. The addition of FSH (1,000 mIU/mL), hCG (10,000 mIU/mL), and TSH (1,000 µIU/mL) to negative (0 mIU/mL hLH) and positive (30mIU/mL hLH) specimens showed no cross-reactivity.

12. **Q: Do alcohol or common medications affect the test?**

A: No, but you should consult your physician if you are taking any hormonal medication. Also, recent oral contraceptive use, breastfeeding, or pregnancy could affect the test results.

13. **Q: How long will the lines remain visible?**

A: The test should be read at 5 minutes for best results. A positive (Surge) result will never disappear. The colored line(s) may become darker and a tinted background may appear after several hours. Some negative results may later display a faint second color line because of evaporation from the test line. Therefore, you should not read the results after 10 minutes; discard the test once you have read the result.

14. **Q: I am now using the basal body temperature method (BBT). Does this test replace BBT?**

A: The LH Ovulation Rapid Test does not replace the BBT method. The shift in basal body temperature primarily indicates that ovulation has already occurred. The LH Ovulation Rapid Test indicates that ovulation is about to occur.

15. **Q: I received a positive result and had intercourse during these fertile days but I have not become pregnant. What shall I do?**

A: There are many factors that can affect your ability to become pregnant. It can take normal, healthy couples many months to achieve a pregnancy and often you may need to use the test kit for 3-4 months before achieving pregnancy. If pregnancy is not achieved after 3-4 months, you and your partner should consult your physician.

16. **Q: I have had a positive result and had intercourse during these fertile days. I think I may be pregnant. How soon can I find out?**

A: The HCG Pregnancy Test can provide you with results as early as the first day of your missed period.

【BIBLIOGRAPHY】

1. Elkind-Hirsch, K; Goldzieher, JW; Gibbons, WE and Besch, PK. Obstetrics and Gynecology, 67(3): 450-453, 1986.

Index of Symbols			
	Consult Instructions For Use		Tests per kit
	For <i>in vitro</i> diagnostic use only		Use by
	Store between 2-30°C		Lot Number
	Do not use if package is damaged		Manufacturer
	Authorized Representative		Do not reuse
	Catalog #		



Test Rapid Ovulației LH (Urină)

Prospect

Pentru autotestare

REF FLH-U101H	Romana
---------------	--------

Un test rapid pentru detectarea calitativă a hormonului luteinizant (LH) în urina umană.

【UTILIZARE DESTINATĂ】

Test Rapid Ovulației LH (Urină) este un imunodozator cromatografic rapid pentru detectarea calitativă a hormonului luteinizant uman (hLH) în urină pentru a ajuta la detectarea ovulației. Rezultatul poate fi citit vizual în câteva minute pentru a indica un rezultat pozitiv sau negativ pentru ovulație.

【SUMAR】

Ovulația este eliberarea unui ovul din ovar. Ovulul trece apoi în trompele uterine, unde este gata să fie fertilizat. Pentru ca sarcina să aibă loc, ovulul trebuie să fie fertilizat de spermatozoizi în termen de 24 de ore de la eliberare. Imediat înainte de ovulație, organismul produce o cantitate mare de hormon luteinizant uman (hLH) care declanșează eliberarea unui ovul maturizat din ovar. Acest "val de hLH" are loc, de obicei, la mijlocul ciclului menstrual.¹ Testul rapid de testare a ovulației LH Dipstick (urină) este un sistem complet care ajută la prezicerea momentului ovulației și a vârfului de fertilitate. În timpul acestei perioade fertile este cel mai probabil să apară sarcina. Test Rapid Ovulației LH (Urină) detectează creșterea hLH în urină, semnalând că ovulația este probabil să aibă loc în următoarele 24-36 de ore. Testul utilizează o combinație de anticorpi, inclusiv un anticorp monoclonal LH, pentru a detecta în mod selectiv nivelurile ridicate de LH. Important: Este posibil ca valul de hLH și ovulația să nu apară în toate ciclurile menstruale.

【PRINCIPIUL TESTULUI】

Test Rapid Ovulației LH este un imunodozator rapid cu flux lateral pentru detectarea calitativă a creșterilor de hLH în urină, ceea ce indică faptul că ovulația va avea loc probabil în următoarele 24-36 de ore. Testul utilizează o combinație de anticorpi, inclusiv un anticorp monoclonal hLH, pentru a detecta selectiv nivelurile ridicate de hLH. Proba de urină avansează lateral pe test datorită forțelor capilare. În prezența hLH, are loc o reacție imunologică între hLH și anticorpii anti-hLH marcați, ceea ce duce la o linie de testare colorată distinctă. În funcție de concentrația de hLH, linia de testare devine mai deschisă sau mai închisă. Alți anticorpi marcați din linia de control. Această reacție servește drept dovadă pentru utilizarea și funcționarea corectă a benzii de testare. Această metodologie se numește imunocromatografie.

【REACTIVI】

Testul conține particule anti-LH și anticorpi anti-LH acoperiți pe membrană.

【COLECTAREA ȘI PREGĂTIREA PROBELOR】

- Determinați momentul optim pentru colectarea urinei. Pentru cele mai bune rezultate, colectați urina cam la aceeași oră în fiecare zi. Unele femei au constatat că cea mai bună probă este după ora 12.00. Nu colectați prima probă de urină după ce vă treziți.
- Reduceți aportul de lichide cu aproximativ 2 ore înainte de recoltarea urinei.
- Înregistrați data, ziua ciclului și ora recoltării urinei. Consultați GRAFICUL REZULTATELOR TESTULUI de la sfârșitul acestui prospect.
- Utilizați un nou recipient de colectare a probelor pentru fiecare probă.
- Urina poate fi păstrată la temperatura camerei timp de până la 8 ore sau la 2-8°C timp de până la 24 de ore. Nu congelați. Pentru cele mai bune rezultate, testați urina în aceeași zi în care este colectată. Dacă este refrigerată, lăsați urina să ajungă la temperatura camerei înainte de testare. Nu agitați recipientul. Dacă se formează sedimente pe fundul recipientului de colectare, lăsați sedimentele să se sedimenteze. Folosiți numai urina din partea de sus a recipientului.

【PRECAUTII】

Vă rugăm să citiți toate informațiile din acest prospect înainte de a efectua testul.

- Nu utilizați după data de expirare imprimată pe punga de folie.
- Nu utilizați dacă punga este ruptă sau deteriorată.
- A se păstra într-un loc uscat la 2-30°C sau 36-86°F. Nu congelați.
- A nu se păstra la îndemâna copiilor.
- Nu deschideți punga de folie de testare decât atunci când sunteți gata să începeți testul.
- Pentru utilizare pentru diagnostic in vitro. A nu se administra pe cale internă.
- Testul folosit poate fi eliminat la deșeurile menajere normale.
- Nu mai pentru o singură utilizare.

【DEPOZITARE ȘI CONDITII PASTRARE】

A se păstra așa cum este ambalat, la temperatura camerei sau la frigider (2-30°C). Testul este stabil până la data de expirare imprimată pe punga sigilată. Testul trebuie să rămână în punga sigilată până la utilizare. **NU CONGELAȚI.** Nu utilizați după data de expirare. Evitați expunerea la lumina directă a soarelui, la umiditate sau la căldură.

【MATERIALE】

Materiale furnizate: 1. Testări cu bandele; 2. Prospect;

Materiale necesare, dar care nu sunt furnizate: 1. Recipient de colectare a probelor; 2. Cronometru

【INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE】

CÂND SĂ ÎNCEPEȚI TESTAREA

Calculați când trebuie să începeți testarea folosind tabelul de mai jos.

- Mai întâi, determinați lungimea ciclului menstrual. Durata ciclului dvs. menstrual este numărul de zile de la prima zi a menstruației (sângerare menstruală) până la ultima zi înainte de începerea următoarei menstruații.
- Apoi, determinați Zilele de numărât înainte după menstruație pentru a începe testarea. Găsiți lungimea ciclului menstrual pe primul rând al graficului de mai jos și citiți numărul corespunzător din al doilea rând. Acesta este numărul de zile după menstruație pentru a începe testarea.
- Dacă ciclul dvs. este mai scurt de 21 de zile sau mai lung de 38 de zile, consultați-vă medicul. Dacă nu cunoașteți durata ciclului dumneavoastră, puteți începe testul la 11 zile după prima menstruație, deoarece durata medie a ciclului este de 28 de zile.
- Consultați exemplul și exemplul de calendar de mai jos pentru a determina ziua în care ar trebui să începeți testul. Prima urină de dimineață NU trebuie folosită la testarea pentru LH. Pentru cele mai bune rezultate, ar trebui să testați cam la aceeași oră în fiecare zi. Ar trebui să reduceți consumul de lichide cu aproximativ 2 ore înainte de testare. Efectuați 1 test în fiecare zi pe parcursul unei perioade, sau până când a fost detectată creșterea hLH.

Când să începeți graficul de testare

Ciclul menstrual Lungime	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zile de numărât înainte	6	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Exemplu: Durata ciclului meu obișnuit este de 28 de zile. Ultima mea menstruație a început pe data de 3. Tabelul "When to Start Testing Chart" arată că voi număra cu 11 zile înainte începând cu data de 3. Când număr cu 11 zile înainte pe calendar, constat că voi colecta și testa urina începând cu data de 13.

Exemplu de calendar

Exemplu de calendar						
D	L	M	Mi	J	V	S
	1	2	③	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			


○Prima zi a ultimei perioade

□ Începeți testarea cu testul de ovulație LH

【INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE】

Determinați ziua în care veți începe testarea folosind "Tabelul "Când începeți testarea"". Este necesar un cronometru pentru a efectua testul (nu este furnizat).

- Lăsați proba de test și proba de urină să ajungă la temperatura camerei (15-30°C) înainte de testare.
- Aduceți punga la temperatura camerei înainte de a o deschide. Scoateți testul Dipstick din punga sigilată și utilizați-l în termen de o oră.
- Cu săgețile îndreptate spre proba de urină, scufundați tija de testare vertical în proba de urină timp de cel puțin **10-15 secunde**. Nu depășiți linia maximă (MAX) de pe tija de testare atunci când scufundați tija. Consultați ilustrația de mai jos.
- Așezați tija de testare pe o suprafață plană curată, uscată și neabsorbantă, porniți cronometrul.
- Așteptați să apară linia (liniile) colorată (colorate). **Citiți rezultatele la 5 minute.** Nu interpretați rezultatul după 10 minute. Testul folosit poate fi aruncat la deșeurile menajere normale.

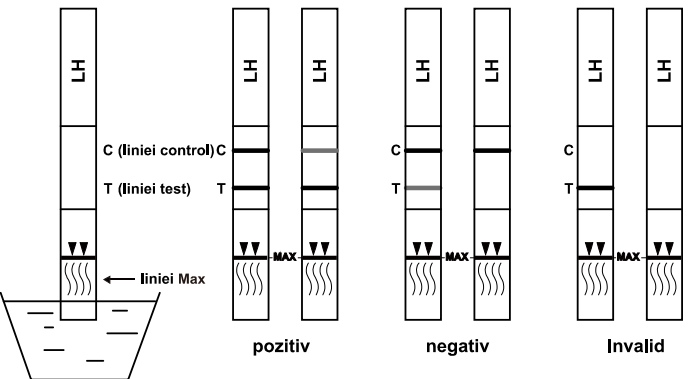

【INTERPRETAREA REZULTATELOR】

(Vă rugăm să consultați ilustrația)

POZITIV: Sunt vizibile două linii, iar linia din regiunea liniei de testare (T) este la fel sau mai închisă decât linia din regiunea liniei de control (C). Acest lucru indică o ovulație probabilă în 24-36 de ore.

NEGATIV: Sunt vizibile două linii, dar linia din regiunea liniei de test (T) este mai deschisă decât linia din regiunea liniei de control (C) sau nu există nicio linie în regiunea liniei de test (T). Acest lucru indică faptul că nu a fost detectată nicio supratensiune hLH.

INVALID: Nu apare linia de control. Volumul insuficient al probei sau tehnicile procedurale incorecte sunt cele mai probabile motive pentru eșecul liniei de control. Revizuiți procedura și repetați testul cu un nou test. Dacă problema persistă, întrerupeți imediat utilizarea kitului de testare și contactați distribuitorul local.

【CONTROLUL CALITATII】

În cadrul testului este inclus un control procedural. O linie colorată care apare în regiunea liniei de control (C) este considerată un control procedural intern. Acesta confirmă un volum suficient de probă, o absorbție adecvată a membranei și o tehnică procedurală corectă. Un rezultat pozitiv indică faptul că proba de urină conține nivelul de LH care ar indica începutul ovulației. Ovulația ar trebui să înceapă în 24-36 de ore.

Un rezultat negativ indică faptul că nu a fost detectat niciun val de LH și că trebuie continuată testarea zilnică. Nu toate femeile ovulează la jumătatea ciclului, prin urmare, este posibil ca un rezultat pozitiv să nu apară în zilele de testare selectate. Dacă nu apare niciun rezultat pozitiv, continuați testarea cu testul rapid de ovulație LH timp de încă câteva zile. Dacă rezultatele negative persistă, testați din nou în timpul următorului ciclu menstrual.

【LIMITARI】

- Pentru autotestare în scopuri de diagnostic *in vitro*.
- Acest test nu poate fi utilizat ca formă de control al nașterii.
- Nu refolosiți testele.
- Rezultatele testului nu trebuie să fie afectate de analgezice, antibiotice și alte medicamente uzuale. 5. Medicamentele care conțin hCG sau hLH pot afecta testul și nu trebuie luate în timpul utilizării testului rapid de ovulație LH. În plus, testul nu va funcționa corespunzător pentru subiecții care sunt însărcinați, la menopauză sau care iau pilule contraceptive.

5. A nu se păstra la îndemâna copiilor.

【EXTRA INFORMATII】

1. Î: Când pot face testul?

R: După ce stabiliți cea mai bună zi pentru a începe testarea în funcție de ciclul dvs. lunar, puteți face testul în orice moment în ziua respectivă. Testarea cu urina din prima dimineață nu este recomandată, deoarece este concentrată și poate da un rezultat fals pozitiv. Testarea între orele 10:00 AM și 20:00 PM este un interval de timp bun, multe cercetări sugerând testarea la ora 12:00 AM. Testați cam la aceeași oră în fiecare zi. Reduceți aportul de lichide timp de 2 ore înainte de testare.

2. Î: Pot folosi testul rapid de ovulație LH pentru a evita sarcina?

R: Nu, testul nu ar trebui să fie folosit ca o formă de control al nașterii.

3. Î: Cât de precis este testul rapid de ovulație LH?

R: S-a efectuat o evaluare clinică prin care s-au comparat rezultatele obținute cu ajutorul Testului rapid de ovulație LH cu un alt test LH pentru urină disponibil în comerț. Evaluarea clinică internă a inclus 300 de probe de urină. Rezultatele au demonstrat o specificitate >99,9 % și o sensibilitate >99,9 %, cu o acuratețe generală de >99,9 %.

4. Î: Ce se întâmplă dacă nu apare nicio linie în regiunea de control?

R: Dacă nu apare nicio linie în regiunea Control după 5 minute, rezultatul nu este valid și trebuie să repetați testul cu un nou test. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați producătorul.

5. Î: Am testat timp de mai multe zile și nu am văzut nicio supratensiune. Ce trebuie să fac?

R: Deoarece fiecare femeie nu ovulează întotdeauna la mijlocul ciclului, este posibil să nu detectați creșterea hLH în primele șapte zile de testare. Acest lucru ar putea însemna că nu ați ovulat încă și ar trebui să continuați testarea cu un test LH suplimentar.

6. Î: Am testat timp de 8 zile sau mai mult și tot nu am observat creșterea hLH, ce este în neregulă?

R: Aproximativ 90% dintre femeile care ovulează cu cicluri regulate își vor vedea creșterea în timpul a 8-10 zile de testare. Dacă nu îl vedeți, ar putea însemna că nu ați ovulat luna aceasta. Dacă aveți un ciclu scurt în această lună, este posibil să fi ovulat înainte de a începe testarea. Dacă aveți un ciclu lung în această lună, este posibil să nu fi ovulat încă. Puteți continua testarea sau testa din nou luna viitoare. Nu vă faceți griji; este normal să aveți ocazional un ciclu scurt sau lung sau să aveți un ciclu fără a ovula.

7. Î: Am folosit testul de ovulație timp de trei luni și în fiecare lună am văzut o creștere și am avut relații sexuale în acea zi sau noapte. Nu am rămas încă însărcinată. Ce s-a întâmplat?

R: În primul rând, este important să vă amintiți că poate fi nevoie de cupluri normale și sănătoase de multe

luni pentru a rămâne însărcinate. Există mulți factori care pot afecta capacitatea dumneavoastră de a rămâne însărcinată chiar dacă ați reușit să aveți relații sexuale în

zilele cele mai fertile. Dacă după mai multe luni nu aveți succes, consultați-vă cu medicul sau cu furnizorul de servicii medicale.

8、 Î: Ce ar putea interfera cu rezultatul testului meu?

R: dacă sunteți deja însărcinată, ați fost recent însărcinată sau ați ajuns la menopauză, puteți obține un rezultat înșelător. Unele medicamente eliberate pe bază de prescripție medicală, cum ar fi menotropinele pentru injecție și Danazol, pot afecta rezultatele pe care le vedeți. Vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră dacă aveți întrebări cu privire la interacțiunile medicamentelor cu prescripție medicală.

9、 Î: Contraceptivele orale vor afecta rezultatul?

R: După utilizarea pilulei, ciclul dvs. poate fi neregulat și poate dura ceva timp pentru a se stabili din nou. Este posibil să doriți să așteptați până când ați avut două menstruații normale înainte de a începe să utilizați testul.

10、 Î: Dacă Testul poate determina perioada mea cea mai fertilă, de ce nu îl pot folosi pentru contracepție?

R:Sperma poate supraviețui până la 72 de ore, iar acest test prezice creșterea hLH doar cu 24 până la 36 de ore înainte. Prin urmare, dacă aveți relații sexuale înainte de a vă descoperi valul, ovulul poate fi încă fertilizat.

11、 Î: Cât de sensibil este testul rapid de ovulație LH?

R: Testul rapid de ovulație LH detectează hormonul luteinizant uman (hLH) în urină la concentrații de 30 mIU/mL sau mai mari. Adăugarea de FSH (1.000 mIU/mL), hCG (10.000 mIU/mL) și TSH (1.000 µIU/mL) la probele negative (0 mIU/mL hLH) și pozitive (30mIU/mL hLH) nu a arătat nicio reactivitate încrucișată.

12、 Î: Alcoolul sau medicamentele uzuale afectează testul?

R: Nu, dar ar trebui să vă consultați medicul dacă luați orice medicament hormonal. De asemenea, utilizarea recentă a contraceptivelor orale, alăptarea sau sarcina ar putea afecta rezultatele testului.

13、 Î: Cât timp vor rămâne vizibile liniile?

R: Testul trebuie citit la 5 minute pentru cele mai bune rezultate. Un rezultat pozitiv (Surge) nu va dispărea niciodată. Linia (liniile) colorată (colorate) poate (pot) deveni mai întunecată (întunecate) și poate (pot) apărea un fond colorat după câteva ore. Unele rezultate negative pot afișa ulterior o a doua linie slabă de culoare din cauza evaporării de pe linia de testare. Prin urmare, nu trebuie să citiți rezultatele după 10 minute; aruncați testul după ce ați citit rezultatul.

14、 Î: Acum folosesc metoda temperaturii bazale a corpului (BBT). Acest test înlocuiește BBT?

R: Testul rapid de ovulație LH nu înlocuiește metoda BBT. Schimbarea temperaturii corporale bazale indică în primul rând faptul că ovulația a avut deja loc. Testul rapid de ovulație LH indică faptul că ovulația este pe cale să aibă loc.

15、 Î: Am primit un rezultat pozitiv și am avut relații sexuale în aceste zile fertile, dar nu am rămas însărcinată. Ce trebuie să fac?

R: Există mulți factori care pot afecta capacitatea dumneavoastră de a rămâne însărcinată. Cuplurilor normale și sănătoase le poate lua mai multe luni pentru a obține o sarcină și, adesea, este posibil să fie nevoie să utilizați kitul de testare timp de 3-4 luni înainte de a obține o sarcină. Dacă nu se obține o sarcină după 3-4 luni, dumneavoastră și partenerul dumneavoastră trebuie să vă consultați medicul.

16、 Î: Am avut un rezultat pozitiv și am avut relații sexuale în aceste zile fertile. Cred că este posibil să fiu însărcinată. Cât de repede pot afla?

R: Testul de sarcină HCG vă poate oferi rezultate încă din prima zi a lipsei menstruației.

【BIBLIOGRAFIE】

1. Elkind-Hirsch, K; Goldzieher, JW; Gibbons, WE and Besch, PK. Obstetrics and Gynecology, 67(3): 450-453, 1986.

Consultati instrucțiunile de utilizare			Teste pe kit		Reprezentant Autorizat in EU
	Pentru <i>in vitro</i> numai pentru diagnosticare		A se utiliza inainte de		A nu se reutiliza
	Depozitați între 2- 30°C		Lot numar		Catalog #
	Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat		Producator		

 Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.
#550 Yinhai Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn




MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10,
48163 Muenster,
Germany

Numar:
Data revizie: 2024-01-29